


FŰTŐFEJ MASSZÁZSPISZTOLYHOZ

Akkumulátor-kapacitás	900 mAh
Elemtípus	18350
Töltési idő	3–3,5 óra
Használható töltő	5V–2A mobiltelefon töltő
Kimeneti áram	0,21–0,23A
Biztonsági üzemidő	15 perc
Maximális hőmérséklet	1. fokozat: 44°C Max 2. szakasz: 56°C Max 3. szakasz: 61°C Max

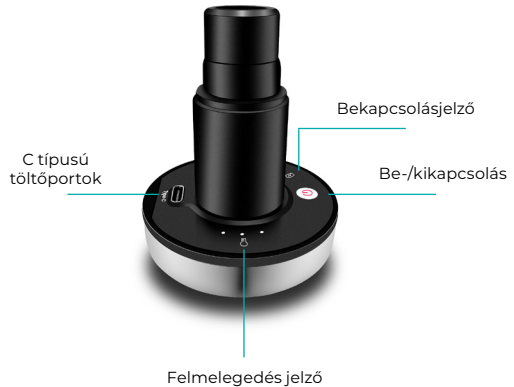

UTASÍTÁS

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, és kigyullad az első fűtésjelző. Nyomja meg a bekapcsológombot másodszor és harmadszor, és a fennmaradó két fűtésjelző egyenként világít. A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a bekapcsológombot, amikor az összes fűtésjelző világít.

A kék feszültségjelző azt jelzi, hogy az akkumulátor normál állapotban van. A villogó piros jelzőfény azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerült, és szükség van rá tölteni.

A töltésjelző pirosan világít töltés közben, és kékre vált, ha teljesen fel van töltve.