



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ČESKY

MB1Pro
MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

O NÁS

MISURA prostřednictvím kvalitních produktů podporuje zdravý životní styl a posouvá tím životní úroveň jejich uživatelů.

Cvičení a sportovní aktivita nepochybně přispívá k naší fyzické i psychické pohodě. Po fyzickém výkonu by měla následovat také relaxace a důkladné uvolnění namáhaných svalů. V dnešní hektické době na toto někdy nezbývá čas a důsledkem může být přílišná únava svalů, napětí a někdy i nepříjemné bolesti.

MISURA přináší řešení ve formě masážního přístroje MISURA MB1Pro. Jedná se o ruční masážní zařízení, které aplikuje koncentrované tlakové pulsy hluboko do svalové tkáně. Tyto tlakové pulsy eliminují svalové uzly, pomáhají uvolnit svaly, zlepšovat krevní oběh a rychle zvyšovat rozsah pohybu. Správné použití masážní pistole může rychle zkrátit dobu regenerace po výkonu a zároveň snížit napětí a případnou bolest svalů.

MISURA – ŘEŠENÍ NA MÍRU!

O PRODUKTU

Masážní přístroj MISURA je navržen a vyvinut ve spolupráci s týmem fyzioterapeutů, spinálních terapeutů a profesorů ergonomie. K testování výrobku byli přizváni i profesionální sportovci. Jedinečné funkce a vlastnosti výrobku neustále podrobujeme zkouškám, abychom dosáhli optimálního výkonu přístroje a poskytli tak zákazníkům co nejúčinnější formu regenerace svalů a profesionální masážní zážitek.

Masážní zařízení MISURA MB1Pro využívá pulzující vibrace přispívající ke zvýšení celkové výkonnosti těla. Ruční masážní přístroj je vyroben z vysoce kvalitních komponentů poskytujících to správné množství vibrací.

Ruční masážní přístroj je vhodný pro všechny věkové skupiny. Je ideálním řešením pro zlepšení celkového výkonu těla, zrychlené zotavení, zvýšení rozsahu pohybu, pohodlí, a tím zlepšení celkové pohody.


OBSAH

KONSTRUKCE.....	1
PARAMETRY.....	2
FUNKCE	3
VÝHODY.....	4
SNADNÝ PROVOZ	8
NABÍJENÍ	9
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.....	10
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	11
VAROVÁNÍ	12
UPOZORNĚNÍ	12
ZÁRUKA.....	13
PRÁVNÍ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI	14
OTÁZKY A ODPOVĚDI.....	15


KONSTRUKCE

1



Boční pohled

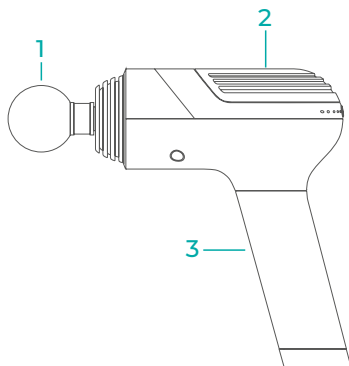


Zadní pohled

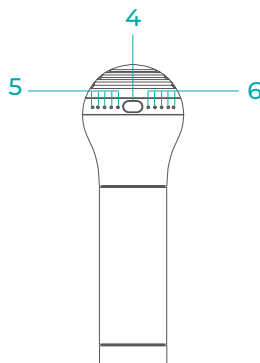


Spodní pohled

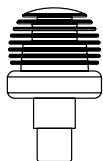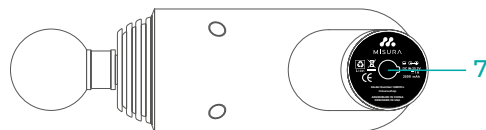


Hlava se vzduchovým polštářem
Exkluzivní patentovaný design, vhodný pro kosti různých částí těla.

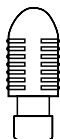


Spirální hlava
Vhodná pro hluboké pulzy tkání jako meridiány, klouby, dlaně, chodidla.

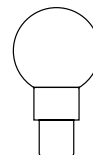


Kulová hlava
Vhodné pro hromadné svalové skupiny, jako jsou paže, pas, boky, stehna a lýtka.

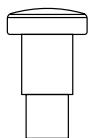

Plochá hlava
Vhodná pro relaxaci a tvarování různých částí svalů.

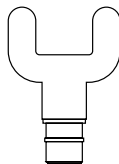


Vídicová hlava
Vhodná pro masáž krku, páteře a Achillovy paty.

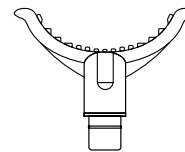

Hlava půlměsíc
Vhodná na ramena a nohy.

PARAMETRY

2

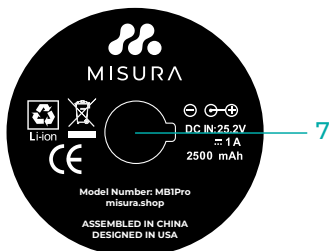

1. Vymíratelné, vyměnitelné hlavice. Silným zatažením vyjměte
2. Vysokorychlostní bezkartáčový motor
3. Rukojeť s bateriemi (25,2 V/1A)
4. Tlačítko On/Off
5. Indikátor stavu baterie LED (modrá)
6. Indikátor úrovně frekvence LED (modrá)
7. DC nabíjecí port

Název produktu	Masážní přístroj MB1Pro
Hmotnost produktu	1,05 kg
Rozměry produktu	25 × 7,5 × 22 cm
Hmotnost balení	2,09 kg
Rozměry balení	35 × 9,7 × 24,5 cm
Hlučnost	Max 35dB
Baterie	6× Li-ion (v balení)
Doba nabíjení	1–2 hodiny
Provozní doba	8 hodin
Automatické vypnutí	Ano
Čas automatického vypnutí	10 minut
Materiály	ABS, silikon, pěna atd.
Obsah balení	masážní přístroj, 6× masážní hlava, napájecí adaptér, návod
Úroveň péče	Hluboká masáž, silný tlak

FUNKCE

3

Svaly mohou být po cvičení ztuhlé a bolestivé a končetiny těžké a slabé. Příčina spočívá ve „fascii“ – fascia je měkká tkáň (blanité pouzdro svalů), která obaluje a propojuje svaly a šlachy. Intenzivní cvičení, absence protahování a uvolňování svalů nebo špatné držení těla mohou způsobit zkrácení, případně prasknutí a poškození fascie a svalů. Dále může snižovat pohyblivost kloubů a způsobovat „zpožděnou bolestivost svalů“.

Produkt MISURA MB1Pro hloubkově uvolní fascii a tím zbavuje pocitu napětí a bolesti. Masážní přístroj MISURA uvolní hluboké svaly pomocí silné vysokofrekvenční vibrační stimulace, pronikne do fascie, rychle rozkládá kyselinu mléčnou produkovanou po cvičení, uvolní napjatou a tuhou svalovou tkáň. Díky masáži uzlových bodů a svalů se zabrání přilnutí svalů, zmírní se únava a bolest a celkové svalové nepohodlí.

Ruční masážní přístroj MISURA MB1Pro je pokročilé masážní zařízení. Provádí hlubokou a silnou vibrační stimulaci, uvolňuje fascii, eliminuje ztuhlost a napjaté svaly, což má za následek následující výhody:

- Urychluje růst svalů.
- Posiluje ohebnost svalů.
- Pomáhá urychlit regeneraci svalů.
- Uvolňuje a snižuje obsah kyseliny mléčné v těle.
- Zlepšuje a rozšiřuje rozsah pohybu.
- Snižuje bolest spojenou s poškozením měkkých tkání.
- Snižuje výskyt opožděné bolesti svalů.
- Zlepšuje průtok krve.



VÝHODY

4


Moderní design ve tvaru písmene T

Štíhlá, inovativní a ergonomii zohledňující protiskluzová rukojeť umožňuje pohodlné a ergonomické uchopení.

Atraktivitu výrobku podtrhuje vysoce kvalitní vesmírně šedý design, který je umocněn čistými liniemi ve tvaru písmene T.

Velká síla přímo do hloubky těla

Díky přesnému vnitřnímu vyvážení disponuje přístroj MISURA MB1Pro výkonem až 3 200 otáček za minutu při velmi nízké spotřebě energie. Tento silný zdroj energie zasáhne svalové skupiny až do hloubky 12 mm. Rychle rozpouští kyselinu mléčnou vytvořenou fyzickou námahou, protáhne každou svalovou buňku, což přináší úlevu hluboko do celého těla.

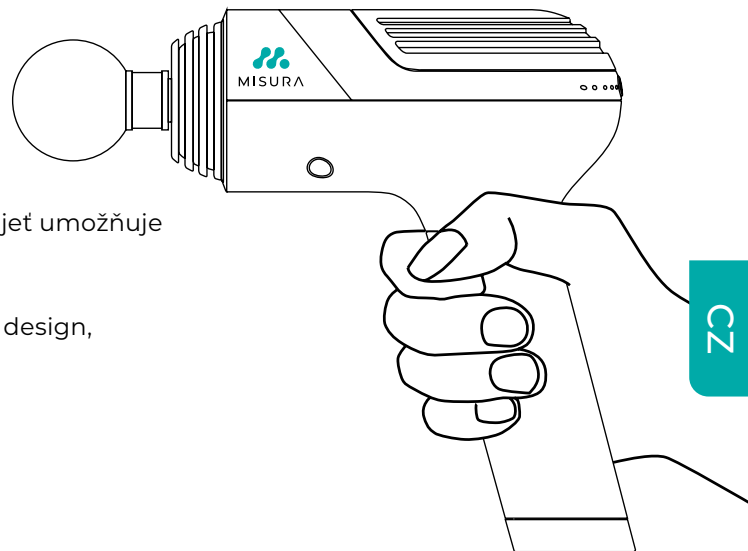


CZ

Pět rychlostních stupňů a technologie inteligentního snímače tlaku

Zařízení je vědecky konstruováno s ohledem na specifické potřeby jeho uživatele. Variabilní pětistupňová frekvence a inteligentní vibrační režim snímání tlaku se dokonale přizpůsobí individuálním potřebám jeho uživatelů. Ať už je to masáž každodenní, zklidňující a relaxační, nebo péče o profesionála, který vyžaduje hloubkovou intenzivní masáž, vždy najdete tu správnou amplitudu.

Tichý provozní režim. Užijte si okamžik relaxace

Špičkový bezkartáčový motor je vybaven novou generací technologie pro redukci hluku, která reguluje hluk na pouhých 35 decibelů. To vám zaručí tichý provoz přístroje kdekoli se rozhodnete jej použít. Ať již v tělocvičně, šatně nebo například v tichu kanceláře či doma. V tichosti nechte odeznít únavu a dopřejte svému tělu a mysli uvolnění a klidnou relaxaci.

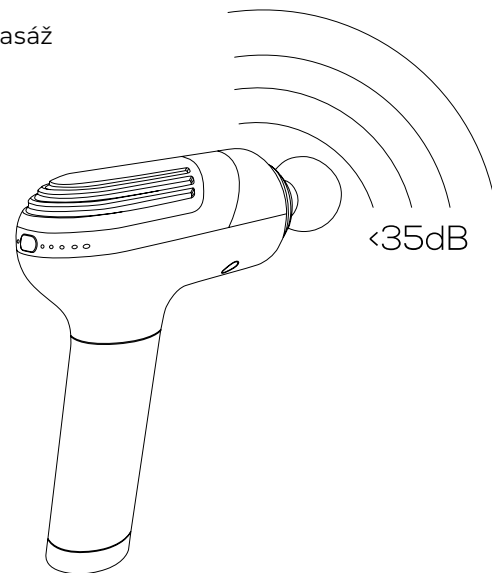


Lithiová baterie s dlouhou výdrží 8 hodin

Masážní přístroj MISURA MB1Pro je vybaven 2 500 mAh li-ion baterií. Díky ní vydrží přístroj pracovat až 8 hodin. S rychlo-nabíječkou trvá plné nabití 2 hodiny.

Vysoká účinnost a úsporný provoz umožňuje přístroj nepřetržitě používat v režimu prvního rychlostního stupně přibližně 36 dní bez nabití (při běžném denním desetiminutovém provozu).

Funkce chytrého vypnutí Smart Shutdown

Doba používání masážního přístroje se liší podle různých částí těla. Aby se zabránilo příliš dlouhé době masáže na jedné části těla a tím případnému poškození svalů a kostí, je masážní přístroj vybaven inteligentní funkcí času Smart Shutdown. Automaticky se zastaví po 10 minutách nepřetržitého používání. Chráníte tím své tělo a prodlužujete životnost přístroje.

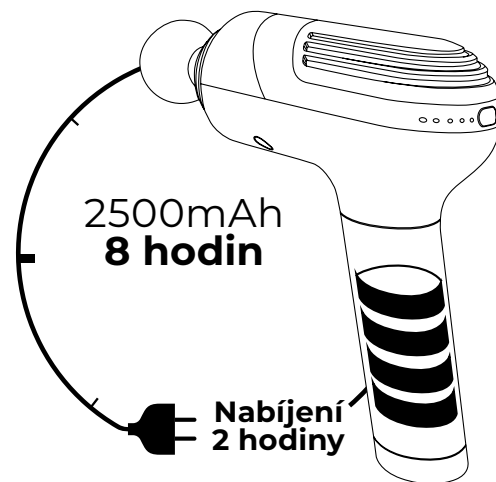

Vhodné pro každého díky variabilnímu nastavení

Masážní přístroj MISURA MB1Pro je vhodný při příznacích bolesti zad, ramen, šíje způsobené dlouhodobým sezením v kanceláři, přenášením těžkých předmětů a cestováním na dlouhé vzdálenosti. Je také vhodný pro sportovce. Zařízení MISURA MB1Pro je vynikajícím doplňkem péče o zdraví, pro uvolnění ztuhlých svalů, relaxaci a regeneraci a tvarování těla.

Lehký, kompaktní a ideální na cesty


Kombinace gumy, ultralehkého skleněného vlákna, lehkého a vysoce výkonného motoru zajistí kompaktnost výrobku a překvapí jeho nízkou hmotností. Přístroj i veškeré jeho příslušenství je uloženo v praktickém vodotěsném kufříku, který chrání vybavení před vnějšími vlivy a nečistotami. Díky tomu můžete mít svůj masážní přístroj MISURA MB1Pro stále s sebou i na Vašich cestách.



SNADNÝ PROVOZ

8


Jakmile je zařízení plně nabito, zapněte ho dlouhým stisknutím tlačítka On/Off, poté zařízení zůstane na prvním stupni rychlosti, dále následuje druhé krátké stisknutí na stupeň dvě, třetí krátké stisknutí na stupeň tři. Stejným způsobem si můžete nastavit na stupeň čtyři nebo pět. Svitící modré LED diody označují odpovídající stupeň výkonu. Po dokončení masáže znovu dlouze stiskněte tlačítko On/Off a vypněte zařízení. Masírujte požadovanou část těla danou rychlostí a vyvíjejte tlak podle potřeby. Nejdůležitější je, že náš produkt má integrovaný systém Smart Shutdown, díky kterému se zařízení automaticky vypne po 10 minutách provozu. Je to skvělá ochrana pro vaše tělo a stejně tak i pro zařízení.

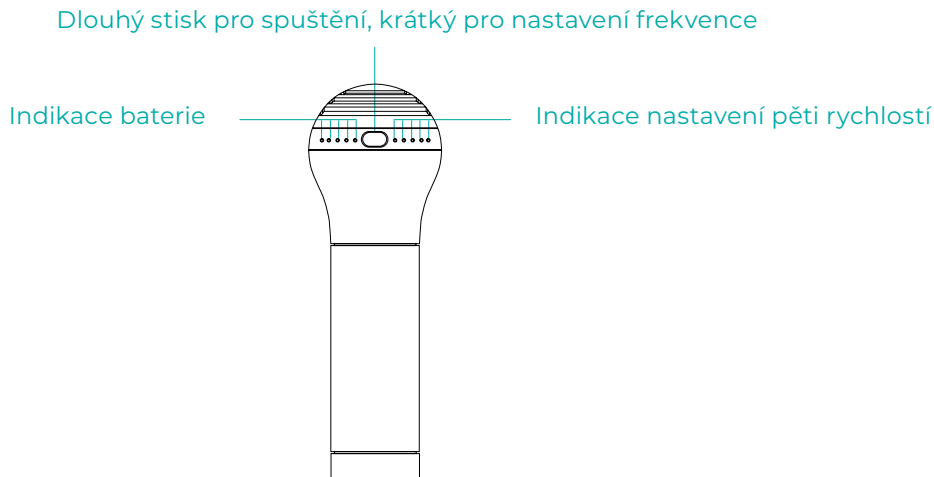

NABÍJENÍ

9

- Před prvním použitím baterii přibližně 2 hodiny plně nabijte.
- Připojte adaptér DC k nabíjecímu portu a zapojte kabel nabíječky do zásuvky ve zdi.
- Pásky LED diod baterie ukazují úroveň nabití baterie a indikují aktivní nabíjení.
- S připojenou baterií LED diody na jednotce blikají, zobrazují stav baterie a indikují aktivní nabíjení.
- Plné nabití je indikováno, když všechny kontrolky LED přestanou blikat a zůstanou trvale svítit.
- Baterii lze kdykoli dobít při jakékoli úrovni nabití.
- Nedoporučuje se úplně vybit baterii až na úroveň červené LED diody, což výrazně zkracuje její životnost.
- Průměrná doba výdrže baterie je až 8 hodin na základě rychlosti stupně jedna. Výdrž baterie se snižuje při použití vyššího stupně rychlosti

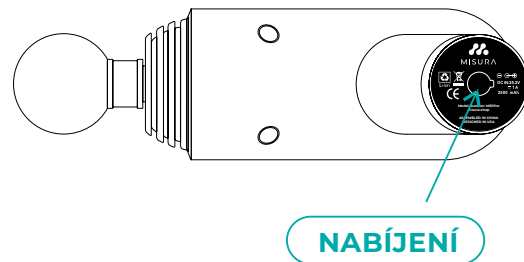


RADY

Zařízení by se mělo udržovat plně nabité, i když se nepoužívá. Pomáhá to k prodloužení životnosti baterie zařízení. Baterie může vydržet plně nabitá přibližně 2 roky. Přesto doporučujeme každého půl roku zkontrolovat stav baterie a případně ji dobít do plna.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

10

- Zařízení čistěte mírně navlhčeným ručníkem a poté jej osušte měkkým hadříkem.
- Pro skladování nebo cestování používejte kufřík, který je nedílnou součástí výrobku.
- Skladujte na suchém, dobře větraném a dobře přístupném místě. Nestohujte.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, měli byste ho každých šest měsíců vybalit, zkontrolovat a dobít.
- Produkt je vhodný pro převoz auty, vlaky, lodní a leteckou dopravou.
- Produkt by měl být během přepravy uložen tak, aby se předešlo vystavení silným vibracím, kolizím, převrácení, pádu, a nadměrné vlhkosti.

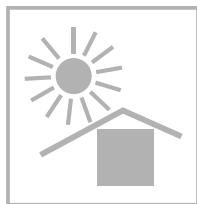

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

11

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob, musí být tento produkt používán podle následujících pokynů.

- Použití pouze pro dospělé.
- Používejte pouze na suchý čistý povrch těla, případně přes oděv mírným přitlačením a pohybem po těle po dobu přibližně 60 sekund v každé oblasti.
- Masážní zařízení používejte podle potřeby pouze na měkkou tkáň těla, aniž byste si způsobovali bolest nebo nepohodlí.
- Nepoužívejte ho na hlavu ani na tvrdé nebo kostnaté oblasti těla.
- Používejte hlavice, které poskytují nejlepší požadovaný efekt na konkrétní svalovou partii.
- K modřinám může dojít bez ohledu na nastavení ovládání nebo aplikovaný tlak. Často ošetřované oblasti kontrolujte a okamžitě přístroj zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí.
- Udržujte prsty, vlasy nebo jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od hřídele a zadní části aplikátoru, protože by mohlo dojít ke skřípnutí.
- Do větracích otvorů masážního zařízení nevkládejte žádné předměty.
- Neponořujte zařízení do vody a nedovolte, aby voda vnikla do ventilačních otvorů masážního zařízení.
- Chraňte zařízení před pádem nebo zneužitím.
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte zařízení a baterii. S jednotlivými komponenty masážního zařízení žádným způsobem nemanipulujte ani jej neměňte.
- Nikdy nenechávejte masážní zařízení v provozu nebo při nabíjení bez dozoru.

VAROVÁNÍ

12

- Neponořujte zařízení do vody.
- Chraňte přístroj před tekutinami a zdroji tepla.
- Chraňte ventilační otvory před prachem a drobnými předměty.
- Neodstraňujte šrouby ani se zařízení nepokoušejte sami opravit. Jakýkoli zásah do konstrukce výrobku znamená ztrátu záruky na tento výrobek.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle než jednu hodinu.
- Umožněte zařízení odpočinek minimálně 30 minut před dalším použitím.
- Po nabití nebo před použitím odpojte nabíječku od baterie zařízení.
- Nezraňte se. V případě nejistoty o vhodnosti používání přístroje se poraďte se svým lékařem.
- Produkt používejte pouze v souladu s návodem k použití, který je k dispozici v manuálu k produktu.

UPOZORNĚNÍ

12

Nepoužívejte masážní zařízení ani žádné vibrační zařízení bez předchozího souhlasu svého lékaře, pokud u Vás platí cokoli z následujícího:

Těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, srdeční slabost, nedávná operace, epilepsie a migrény, herniované disky, spondylolistéza nebo spondylóza, nedávné náhrady kloubů nebo nitroděložní tělíska, kovové čepy nebo destičky nebo jakékoli obavy o vaše fyzické zdraví. Křehké jedince nebo děti by při použití jakéhokoli vibračního zařízení měla doprovázet dospělá osoba. Tyto kontraindikace neznamenaají, že nemůžete používat vibrační nebo cvičební zařízení, ale nejprve se poraďte s lékařem. Probíhající výzkum účinků vibračního cvičení na konkrétní lékařské poruchy pravděpodobně povede ke zkrácení seznamu kontraindikací uvedených výše. Praktické zkušenosti ukázaly, že integrace vibračních cvičení do léčebného plánu je v několika případech doporučena. Cvičení musí být provedeno na radu lékaře a za jeho asistence, případně jiného specialisty nebo fyzioterapeuta.

ZÁRUKA

13

Záruka běží od okamžiku nákupu. Pokud dojde k poruše produktu z důvodu vad materiálu nebo konstrukčního procesu do 24 měsíců, společnost bezplatně opraví nebo vymění vadné díly nebo vymění nové produkty, s výjimkou následujících případů:

- Nesprávné použití nebo poškození zařízení způsobené přepravou.
- Neoprávněná demontáž nebo oprava tohoto zařízení.
- Nedodržení pokynů užití.
- Produkt je poškozen v důsledku neobvyklého prostředí skladování nebo údržby zákazníka.
- Pokud nebude poskytnut doklad o zakoupení, společnost si vyhrazuje právo odmítnout záruku.

PRÁVNÍ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

14

Pokud trpíte některými obtížemi uvedenými v odstavci Upozornění, vždy konzultujte použití výrobku MISURA MBiPro se svým lékařem.

Společnost MISURA Store s.r.o. není licencovaným poskytovatelem zdravotní péče a prohlašuje, že nemá žádné odborné znalosti v diagnostice, zkoumání nebo léčení zdravotních stavů jakéhokoli druhu nebo při určování účinku jakéhokoli konkrétního cvičení nebo terapie na zdravotní stav. Při účasti na jakémkoli cvičení nebo terapii existuje možnost fyzického zranění. Pokud se zapojíte do tohoto cvičení nebo terapie, souhlasíte s tím, že tak činíte na své vlastní riziko, dobrovolně se účastníte těchto aktivit a tím přebíráte veškerá rizika zranění na sebe. Tím také souhlasíte se zproštěním jakýchkoli nároků známých i neznámých vůči společnosti MISURA Store s.r.o. vyplývajících z nedbalosti či nesprávného používání produktu.

Musíte být starší 18let. Pokud pocítíte silnou bolest nebo nepohodlí, okamžitě zařízení přestaňte používat. Jakýkoli cvičební program, včetně tohoto, může mít za následek zranění. Před zahájením tohoto případně jakéhokoli cvičebního nebo terapeutického se poraďte s lékařem. Výrobci, distributoři, dodavatelé a prodejci se zříkají jakékoli odpovědnosti za jakékoli ztráty ve spojení s informacemi, ukázkami cvičení nebo instrukcemi zde uvedenými.

Copyright 2021. MISURA Store Ltd. 24-měsíční omezená záruka. Platnost smluvních podmínek.

Otázka 1: Jak funguje masážní přístroj?

Odpověď: Masážní přístroj MISURA MB1Pro uvolňuje fascie a ztuhlé a napnuté svaly. Díky stimulaci hlubokých a silných vibrací uvolňuje těsné měkké tkáně, podporuje krevní oběh a rychle rozpouští kyselinu mléčnou produkovanou po cvičení, což výrazně zkracuje dobu zotavení svalů. Současně dokáže eliminovat bolesti, snížit přílnavost svalů, zmírnit zánět tkáně, urychlit hojení ran a předcházet sportovním zraněním.

Otázka 2: Můžu vyměnit baterii? Jak mám baterii správně použít? Jaká je životnost baterie?

Odpověď: Zařízení používá vysoce kvalitní lithiové baterie 18650. Baterie je nabíjecí a tudíž nelze samostatně vyměnit. Nerozebírejte ani nevyměňujte baterii bez pomoci technika. Doba provozu je až 8 hodin po úplném nabití. Pro prodloužení životnosti baterie mějte na paměti následující:

1. Před prvním použitím nabijte baterii po dobu 2 hodin, aby se baterie zcela nabila.
2. Když je baterie vyčerpána z 90 %, je třeba ji nabít.
3. Pokud produkt nepoužíváte, plně ho nabijte.

V případě přetrvávajících problémů s baterií kontaktujte technickou podporu na stránkách www.misura.shop

Otázka 3 : Masážní přístroje na trhu vypadají podobně. Jak porovnáím síly, které mají dopad na hlubší stimulaci? Jaká je amplituda? Jaká je hloubka amplitudy?

Odpověď: MISURA MB1Pro je vynikající masážní přístroj pro hluboké tkáně. Je vybaven otočnou konstrukcí se dvěma ložisky, která přináší silnou a prudkou sílu. Vysokorychlostní pulzy 3 200 ot./min mohou proniknout skupinou svalů až do hloubky 12 mm a rychle rozložit kyselinu mléčnou produkovanou po cvičení, čímž získáte pohodlný zážitek přímo v hloubce svalu.

Otázka 4: Jaký je správný způsob vložení příslušenství do přístroje?

Jaká jsou doporučení pro různé příslušenství?

Odpověď: Masážní přístroj MISURA MB1Pro obsahuje šest profesionálních masážních hlav pro přizpůsobení se každé části těla. Příslušné masážní hlavy můžete použít podle svých vlastních potřeb. Správná metoda instalace masážní hlavice: vytáhněte/namontujte hlavu při mírném otáčení masážní hlavice, abyste ji vytáhli/namontovali, nevytahujte/nemontujte ji přímo. Konkrétní instrukce k použití naleznete v naší uživatelské příručce.

Otázka 5: Jaké možnosti rychlosti má masážní přístroj? Jak správně zvolím rychlost?

Odpověď: Masážní přístroj MISURA MB1Pro má pět nastavitelných stupňů rychlosti, které dosahují rychlosti 1300–3200 ot./min. Intenzitu masáže můžete upravit podle svých preferencí frekvence a točivého momentu, které poskytují úlevu hlubokých tkání svalů. Masáž by neměla být bolestivá, a proto volte frekvenci pulsů tak, aby vyhovovala Vaší aktuální potřebě.

Otázka 6: Nemohu vystát hlučný zvuk, jaká je úroveň hluku/ztlumení tohoto masážního přístroje?

Odpověď: Masážní přístroj MISURA MB1Pro používá bezkartáčový motor vybavený novou generací technologie redukce hluku do max. 35 decibelů. Ponořte tělo a mysl téměř do ticha a užijte si klidnou chvíli relaxace.

Otázka 7: Má tento masážní přístroj funkci časování?

Odpověď: Masážní přístroj MISURA MB1Pro je vybaven inteligentní ochranou časování Smart Shutdown. Zastaví se automaticky po deseti minutách nepřetržitého používání. Tím je zajištěn bezpečný provoz, a to jak s ohledem na ochranu zdraví, tak i životnosti přístroje.

Otázka 8: Kdy mohu používat masážní přístroj?

Odpověď: Záleží na situaci. Před cvičením použijte masážní přístroj MISURA MB1Pro, abyste se zahřáli a aktivovali vitalitu svalů. Použití masážního přístroje MISURA MB1Pro během cvičení může uvolnit napnuté svaly. Po cvičení použijte masážní přístroj MISURA MB1Pro, za účelem hluboké masáže a relaxace, zbavení se únavy a bolestivosti a rychlé obnovy vitality.

Otázka 9: Dodává se masážní přístroj s kufrem? Jak je těžký? Je snadné jej přenášet?

Odpověď: Masážní přístroj MISURA MB1Pro váží pouze 1,05 kg, dodává se v kvalitním ergonomickém a vodotěsném kufříku a díky tomu je snadno přenosný. Můžete si jej vzít kamkoli a kdykoli si tak můžete užít nový profesionální masážní zážitek.

Otázka 10: Po zakoupení tento produkt nefunguje. Jaká je politika vrácení zboží? Jak mám kontaktovat výrobce ohledně záruční opravy/výměny?

Odpověď: Pokud do 24 měsíců od data nákupu produkt selže z důvodu vad materiálu nebo konstrukční vady, vyměníme vám ho za nový produkt nebo je bezplatně opravíme.

Pokud existuje cokoli jiného, co bychom pro vás mohli udělat, neváhejte nás kontaktovat: info@misura.shop



Děkujeme za Váš nákup.
V případě potřeby nás kontaktujte na:

Výrobce/Dovozce

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Neručíme za případné tiskové chyby.



MISURA

