



MISURA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

MB1Pro

URZĄDZENIE DO MASAŻU
PERKUSYJNEGO

O NAS

MISURA wspiera zdrowy styl życia poprzez produkty wysokiej jakości i w ten sposób podnosi poziom życia swoich użytkowników.

Ćwiczenia i aktywność sportowa niewątpliwie przyczyniają się do poprawy naszego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Po wysiłku fizycznym powinien nastąpić relaks i gruntowna regeneracja nadwyrężonych mięśni. W dzisiejszych zabieganych czasach czasami nie ma na to czasu, a efektem tego może być nadmierne zmęczenie mięśni, napięcie, a czasami nieprzyjemny ból.

Firma MISURA proponuje rozwiązanie w postaci masażera MISURA MB1Pro. Jest to ręczne urządzenie do masażu, które wprowadza skoncentrowane impulsy ciśnienia głęboko do tkanki mięśniowej. Te impulsy eliminują węzły mięśniowe, pomagają rozluźnić mięśnie, poprawiają krążenie i szybko zwiększają zakres ruchu. Prawidłowe stosowanie masażera może szybko skrócić czas regeneracji po ćwiczeniach, zmniejszając jednocześnie napięcie mięśni i potencjalny ból.

MISURA – ROZWIĄZANIE SZYTE NA MIARĘ!

PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU

Masażer MISURA został zaprojektowany i opracowany we współpracy z zespołem fizjoterapeutów, terapeutów kręgosłupa i profesorów ergonomii. Do testowania produktu zaproszono również profesjonalnych sportowców. Unikalne funkcje i cechy produktu są stale testowane w celu osiągnięcia optymalnego działania urządzenia, zapewniając klientom najbardziej efektywną formę regeneracji mięśni. oraz profesjonalny masaż.

Masażer MISURA MB1Pro używa pulsujące wibracje, które pomagają zwiększyć ogólną wydolność organizmu. Masażer ręczny wykonany jest z wysokiej jakości komponentów zapewniających odpowiednią ilość wibracji.

Masażer ręczny jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Idealnie nadaje się do poprawy ogólnej wydolności organizmu, przyspieszenia regeneracji, zwiększenia zakresu ruchu, komfortu, a także poprawia ogólnego samopoczucia.


SPIS TREŚCI

STRUKTURA.....	1
PARAMETRY.....	2
FUNKCJA.....	3
ZALETY.....	4
ŁATWA OBSŁUGA	8
ŁADOWANIE.....	9
UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE	10
BEZPIECZNE INSTRUKCJE.....	11
OSTRZEŻENIA	12
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	12
GWARANCJA.....	13
ZASTRZEŻENIA PRAWNE.....	14
PYTANIA I ODPOWIEDZI.....	15


STRUKTURA

1


Widok z boku

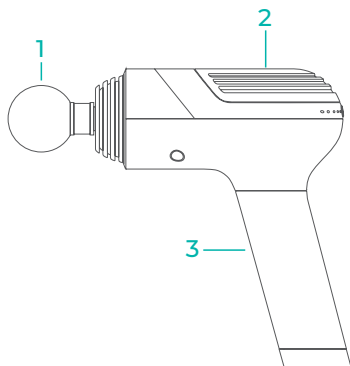

Widok z tyłu

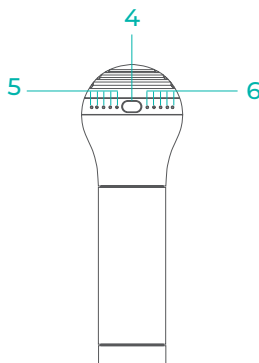


Widok z dołu

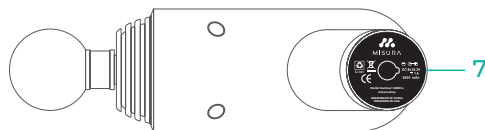


Główica z poduszką powietrzną
Ekskluzywny opatentowany design, odpowiedni dla kości różnych części ciała.




Spiralna główica
Alkalmas mély szöveti impulzusokhoz, például meridiánokhoz, izületekhez, tenyérhez, lábfejhez.

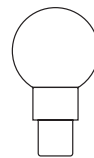


Główica kulowa
Odpowiedni do oddziaływania na głębokie tkanki, takie jak meridiany, stawy, dłonie, podeszwy stóp.

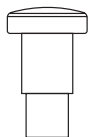

Płaski łeb
Nadaje się do relaksacji i kształtowania różnych partii mięśni.

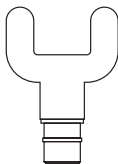


Półokrągły łeb
Nadaje się do masażu szyi, kręgosłupa, ścięgna Achillesa.

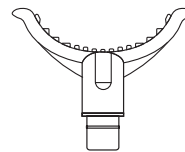

Główica widelca
Nadaje się do masażu szyi, kręgosłupa, ścięgna Achillesa.

PARAMETRY

2

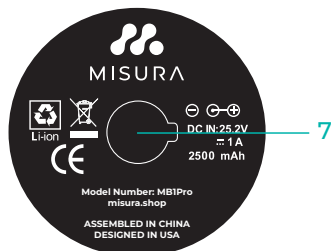

1. Wyjmowane, wymienne aplikatory.
Mocno pociągnąć, aby wyjąć.
2. Wysokoobrotowy silnik bezszczotkowy
3. Uchwyt ręczny z bateriami (25,2V DC/-1A)
4. Przełącznik zasilania
5. Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii (niebieski)
6. Wskaźnik poziomu częstotliwości LED (niebieski)
7. Port ładowania DC

Numer modelu	Urządzenie do masażu MB1Pro
Waga	1,1 kg
Wymiary przedmiotu	25 × 7,5 × 22 cm
Waga opakowania	2,3 kg
Wymiary opakowania	35 × 9,7cm × 24,5
Poziomy hałasu	35dB
Baterie	6 Wymagane baterie litowo-jonowe (w zestawie)
Czas ładowania	2-3 godziny
Żywotność baterii	8 godziny
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Czas automatycznego wyłączenia zasilania	10 Min
Materiały	ABS, silikon, pianka itp.
Dołączone komponenty	1*Pistolet do masażu, 6*Główlice masujące, 1*Zasilacz AC, 1*Podręcznik
Poziomy leczenia	Głęboka perkusja, silny nacisk

FUNKCJE

3

Mięśnie mogą być sztywne i obolałe po ćwiczeniach, a kończyny mogą być ciężkie i słabe. Przyczyna leży w „powięzi” – powięź to tkanka miękka (blanszowana pochewka mięśniowa), która otacza i łączy mięśnie i ścięgna. Intensywne ćwiczenia, brak rozciągania i rozluźnienia mięśni lub zła postawa mogą spowodować skrócenie lub naderwanie i uszkodzenie powięzi i mięśni. Może to również ograniczać ruchomość stawów. i powodują „bolesność mięśni o opóźnionym początku”.

Produkt MISURA MB1Pro głęboko rozluźnia powięź, łagodząc uczucie napięcia i bólu. Masażer MISURA rozluźnia mięśnie głębokie za pomocą silnej stymulacji wibracyjnej o wysokiej częstotliwości, penetruje powięź, szybko rozbija kwas mlekowy powstały po wysiłku, rozluźniając napiętą i sztywną tkankę mięśniową. Poprzez masaż punktów węzłowych i mięśni zapobiega się powstawaniu zrostów mięśniowych, łagodzi się zmęczenie i ból, a ogólny dyskomfort mięśniowy zostaje złagodzony.

Masażer ręczny MISURA MB1Pro jest zaawansowanym urządzeniem do masażu. Wykonuje głęboką i silną stymulację wibracyjną, rozluźnia powięzi, likwiduje sztywność i napięte mięśnie, co daje następujące korzyści:

- Przyspiesza wzrost mięśni.
- Wzmacnia elastyczność mięśni.
- Przyspiesza regenerację mięśni.
- Relaksuje i redukuje kwas mlekowy w organizmie.
- Poprawia i rozszerza zakres ruchu.
- Zmniejsza ból związany z uszkodzeniami tkanek miękkich.
- Zmniejsza częstość występowania bólu mięśni o opóźnionym początku.
- Poprawia przepływ krwi.



ZALETY

4


nowoczesny design w kształcie litery T

Smukła, innowacyjna i ergonomiczna antypoślizgowa rączka umożliwia wygodny i ergonomiczny chwyt.

Atrakcyjność produktu podkreśla wysokiej jakości design w kolorze space grey, który jest wzmocniony przez czyste linie w kształcie litery T.

Duża moc aż do samego ciała

Dzięki precyzyjnemu wyważeniu wewnętrznemu MISURA MB1Pro posiada moc do 3.200 obr/min przy bardzo niskim zużyciu energii. To potężne źródło energii uderza w grupy mięśniowe na głębokość do 12 mm. Szybko rozpuszcza kwas mlekowy powstały w wyniku wysiłku fizycznego, rozciąga każdą komórkę mięśniową, przynosząc ulgę głęboko w całym ciele.

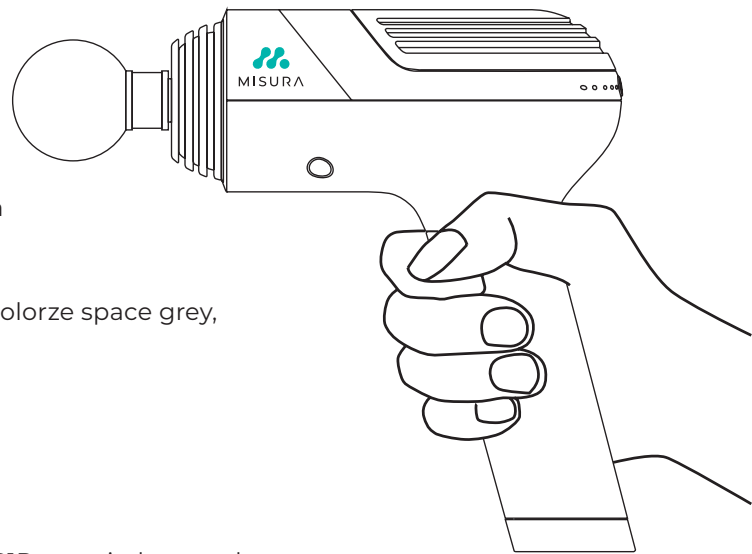


Pięć biegów i inteligentna technologia czujników ciśnienia

Urządzenie zostało naukowo zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach użytkownika. Zmienna, pięciostopniowa częstotliwość oraz inteligentny tryb wyczuwania nacisku wibracji doskonale dopasowują się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Niezależnie od tego, czy jest to codzienny, kojący i relaksujący masaż lub profesjonalna opieka, która wymaga głębokiego, intensywnego masażu, zawsze znajdziesz odpowiednią amplitudę.

Cichy tryb pracy. Ciesz się chwilą relaksu

Wysokiej klasy silnik bezszczotkowy wyposażony jest w technologię redukcji hałasu nowej generacji, która reguluje hałas do zaledwie 35 decybeli. Gwarantuje to cichą pracę, gdziekolwiek zdecydujesz się używać urządzenia. Czy to na siłowni, w szatni, czy w zaciszu biura lub na przykład w domu. W ciszy pozwól, aby Twoje zmęczenie ustąpiło i zapewnij swojemu ciału i umysłowi relaksującą i spokojną regenerację.

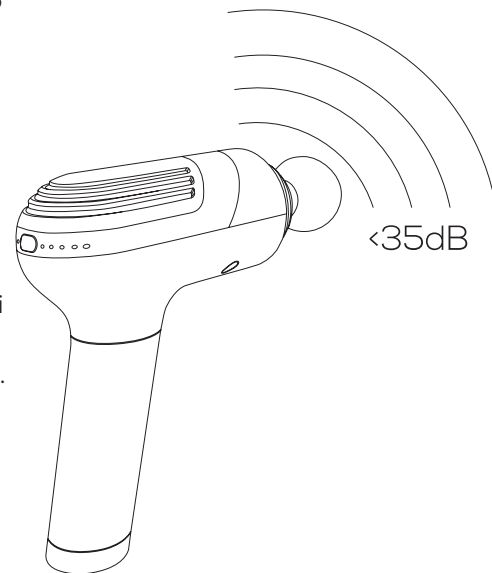

Bateria litowa o długim czasie pracy


Masażer MISURA MB1Pro wyposażony jest w akumulator li-ion o pojemności mAh2500. Dzięki niemu urządzenie może pracować nawet do kilku do 8 godzin.

Z szybką ładowarką, pełne naładowanie trwa kilka 2 godziny.

Wysoka wydajność i tryb oszczędzania energii pozwala na ciągłe użytkowanie urządzenia w trybie pierwszego biegu przez około 36 dni bez ładowania (przy normalnym codziennym użytkowaniu 10 minut dziennie).

Funkcja inteligentnego wyłączenia

Czas użytkowania masażera różni się w zależności od różnych części ciała. Aby zapobiec zbyt długiemu masowaniu jednej części ciała i ewentualnemu uszkodzeniu mięśni i kości, masażer jest wyposażony w funkcję inteligentnego wyłączenia czasowego. Zatrzymuje się on automatycznie po 10 minutach ciągłego użytkowania. Chroni to Twoje ciało i przedłuża żywotność urządzenia.

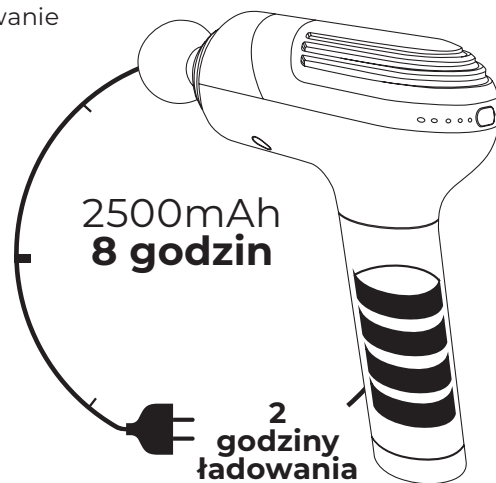

Odpowiednie dla każdego dzięki zmiennej regulacji

Nasz masażer MISURA MB1Pro jest odpowiedni do bólu pleców, ramion i szyi spowodowanego długotrwałym siedzeniem w biurze, noszeniem ciężkich przedmiotów i długimi podróżami. Nadaje się również dla sportowców. Urządzenie MISURA MB1Pro jest doskonałym uzupełnieniem opieki zdrowotnej, do rozluźniania zesztywniałych mięśni, relaksacji i regeneracji oraz kształtowania ciała.

Lekki, kompaktowy i idealny do podróży

Połączenie gumy, ultralekkiego włókna szklanego, lekkiego i wydajnego silnika sprawia, że produkt jest kompaktowy i zaskakująco lekki. Urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami przechowywane jest w praktycznym wodoodpornym etui, które chroni sprzęt przed czynnikami zewnętrznymi i zabrudzeniami. Dzięki temu MISURA MB1Pro możesz mieć zawsze przy sobie, nawet podczas podróży.




ŁATWA OBSŁUGA

8

Gdy urządzenie jest już w pełni naładowane, włączamy je poprzez długie naciśnięcie przycisku On/Off, po czym urządzenie pozostanie na pierwszym poziomie prędkości, po drugim krótkim naciśnięciu przechodzimy na poziom drugi, po trzecim krótkim naciśnięciu na poziom trzeci. W ten sam sposób można ustawić prędkość czwartą lub piątą. Świecące niebieskie diody LED wskazują odpowiedni poziom mocy. Kiedy Po zakończeniu masażu należy ponownie nacisnąć długo przycisk On/Off i wyłączyć urządzenie. Masuj wybraną część ciała z zadaną prędkością i stosuj nacisk w zależności od potrzeb. Co najważniejsze, nasz produkt posiada zintegrowany system Smart Shutdown, który automatycznie wyłącza urządzenie po kilku minutach 10 pracy. To świetna ochrona dla Twojego ciała jak również urządzenie.

Długie naciśnięcie powoduje włączenie zasilania/krótkie naciśnięcie powoduje regulację częstotliwości

Wskaźnik baterii

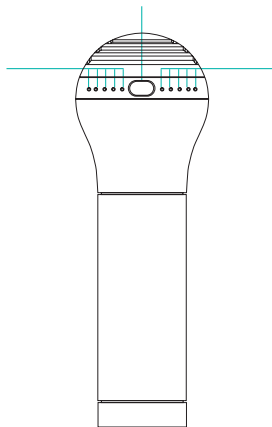


Wskaźnik częstotliwości 5

ŁADOWANIE

9

- Przed pierwszym użyciem baterii należy ją w pełni naładować przez około 2 godziny.
- Podłącz zasilacz DC do portu ładowania i podłącz kabel ładowarki do gniazdka ściennego.
- Paski LED baterii pokazują poziom naładowania baterii i wskazują aktywne ładowanie.
- Po podłączeniu akumulatora diody LED na urządzeniu migają, wskazując stan akumulatora i informując o aktywnym ładowaniu.
- Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy wszystkie diody LED przestaną migać i będą świecić się w sposób ciągły.
- Akumulator może być doładowywany w każdej chwili na dowolnym poziomie naładowania.
- Nie zaleca się całkowitego rozładowania baterii do poziomu czerwonej diody LED, co znacznie skraca żywotność baterii.
- Średni czas pracy na baterii wynosi do godzin w zależności od prędkości etapu pierwszego. Żywotność baterii zmniejsza się w przypadku korzystania z wyższej klasy prędkości

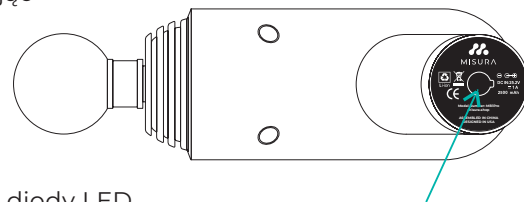

ŁADOWANIE


WSKAZÓWKI

Urządzenie powinno być w pełni naładowane nawet wtedy, gdy nie jest używane. Pomaga to wydłużyć żywotność baterii urządzenia. Bateria może wytrzymać około 2 lata na pełnym naładowaniu. Zalecamy jednak sprawdzanie baterii co sześć miesięcy i w razie potrzeby naładowanie jej do pełna.

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

10

- Czyść urządzenie lekko wilgotnym ręcznikiem, a następnie osusz je miękką ściereczką.
- Na czas przechowywania lub podróży należy użyć etui dołączonego do produktu.
- Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i łatwo dostępnym miejscu. Nie układać w stosy.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je rozpakować, sprawdzić i naładować co sześć miesięcy.
- Produkt nadaje się do transportu samochodowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.
- Produkt powinien być przechowywany podczas transportu, aby uniknąć narażenia na silne wibracje, zderzenia, przewrócenie, upadek i nadmierną wilgotność.

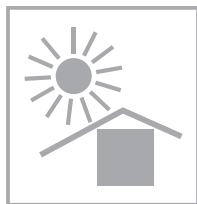

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

11

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała, produkt ten musi być używany zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Tylko do użytku przez dorosłych osób.
- Stosować tylko na suchej, czystej powierzchni ciała lub na ubraniu lub na ubranie, delikatnie naciskając i przesuwając po ciele przez około 60 sekund w każdym obszarze.
- Masażera należy używać tylko na miękkiej tkance ciała, w zależności od potrzeb, nie powodując bólu ani dyskomfortu.
- Nie należy stosować go na głowie ani na twardych lub kościstych częściach ciała.
- Użyj rękawiczek, które dają najlepszy pożądaný efekt na danym obszarze mięśniowym.
- Siniaki mogą pojawić się niezależnie od poziomu kontroli lub zastosowanego nacisku. Należy sprawdzać często poddawane zabiegowi obszary i natychmiast zatrzymać urządzenie przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Palce, włosy lub inne części ciała należy trzymać z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może dojść do uszczyknięcia.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych masażera.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie dopuszczać, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Chronić urządzenie przed upadkiem lub niewłaściwym użyciem.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie i baterię. Nie należy w żaden sposób manipulować ani zmieniać poszczególnych elementów masażera.
- Nigdy nie pozostawiać masażera bez nadzoru, gdy jest używany lub ładowany.

OSTRZEŻENIA

12

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Chronić przed chronić od płynów i źródłami ciepła.
- Chronić otwory wentylacyjne przed pyłem i małymi przedmiotami.
- Nie należy wykręcać śrub ani próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję produktu spowoduje utratę gwarancji na ten produkt.
- Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż jedną godzinę.
- Pozwól urządzeniu odpocząć przez co najmniej 30 minut przed ponownym użyciem.
- Odłącz ładowarkę od baterii urządzenia po zakończeniu ładowania lub przed użyciem.
- Nie zranić się. Skonsultuj się z lekarzem jeśli nie masz pewności, czy urządzenie nadaje się do użytku.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi zawartą w podręczniku produktu.

ŚRODKI

12

Nie należy używać urządzeń do masażu ani żadnych urządzeń wibracyjnych bez uprzedniej zgody lekarza, jeśli dotyczy to któregokolwiek z poniższych przypadków: Cięża, cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, osłabienie serca, niedawne operacje, padaczka i migreny, przepuklina dysku, spondylolisteza lub spondyloza, niedawne wymiany stawów lub wkładki wewnątrzmaciczne, metalowe szpilki lub płytki, lub jakiegokolwiek obawy dotyczące zdrowia fizycznego. Osoby wrażliwe lub dzieci powinny podczas korzystania z urządzeń wibracyjnych przebywać pod opieką osoby dorosłej. Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz korzystać z urządzeń wibracyjnych lub do ćwiczeń, ale najpierw skonsultuj się z lekarzem. Trwające badania nad skutkami w przypadku określonych schorzeń medycznych prawdopodobnie doprowadzą do skrócenia listy przeciwwskazań wymienionych powyżej. Praktyka wykazała, że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest w wielu przypadkach zalecane. Ćwiczenia muszą być wykonywane za radą i z pomocą lekarza, innego specjalisty lub fizjoterapeuty.

GWARANCJA

13

Gwarancja obowiązuje od momentu zakupu. Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu z powodu wad materiałowych lub procesu projektowania w ciągu kilku 24 miesięcy, Spółka bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwe części lub wymieni na nowy produkt, z wyjątkiem poniższych przypadków:

- Niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane transportem.
- Nieuprawniony demontaż lub naprawa tego urządzenia.
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
- Produkt jest uszkodzony z powodu nietypowych warunków przechowywania lub konserwacji przez klienta.
- Jeżeli dowód zakupu nie zostanie przedstawiony, firma zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji.

ZASTRZEŻENIA

14

Jeśli cierpisz na którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie ostrzeżeń, zawsze skonsultuj się z lekarzem przed stosowaniem MISURA MB1Pro

Sklep MISURA Sp. z o.o. nie jest licencjonowanym dostawcą usług medycznych i oświadcza, że nie posiada wiedzy specjalistycznej w zakresie diagnozowania, badania lub leczenia jakichkolwiek schorzeń medycznych lub określania efektów poszczególnych ćwiczeń.

lub terapii na jakąkolwiek chorobę. Istnieje możliwość odniesienia obrażeń fizycznych podczas uczestnictwa w jakichkolwiek ćwiczeniach lub terapii. Jeśli angażujesz się w takie ćwiczenia lub terapię, zgadzasz się robić to na własne ryzyko, dobrowolnie uczestniczysz w tych działaniach, a tym samym przyjmujesz na siebie całe ryzyko obrażeń. W ten sposób zgadzasz się również na zwolnienie wszelkich oraz wszystkich znanych i nieznanych roszczeń wobec MISURA Store Ltd. wynikających z zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania produktu.

Użytkownik musi być starszy niż 18 lat. W przypadku wystąpienia silnego bólu lub dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Każdy program ćwiczeń, także ten, może spowodować obrażenia. Przed rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek innego programu ćwiczeń lub terapii należy skonsultować się z lekarzem. Producenci, dystrybutorzy, dostawcy i sprzedawcy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty związane z informacjami, demonstracjami ćwiczeń lub instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Copyright MISURA2021. Store Ltd, 24 miesięczna ograniczona gwarancja. Ważność warunków i regulaminu.

