

# MASSAGE GUN MB5 MINI

BENUTZERHANDBUCH DEUTSCH



Modell: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU

25 W

Powerful  
Brushless Motor

Only  
35dB

Active  
Lower noise



Light weight  
and Compact



C-Type  
Rechargeable

## PRODUKTÜBERSICHT



## PRODUKT-LISTE

- 1x | Das Gerät
- 1x | Typ-C-Ladeleitung
- 1x | Die Anleitung
- 1x | Spiralkopf
- 1x | Kugelkopf
- 1x | Flachkopf
- 1x | Gabelkopf

## PRODUKTPARAMETER

**Modell:** MB5 MINI Massage Gun

**Rating Spannung:** 7.4v

**Rated Strom:** 2A


**Rated Leistung:** 25W

**Input Parameter:** 5V  2A

**Maximum Geschwindigkeit:** 3200r/min

**Batteriekapazität:** 800mAh

## PRODUKTVERWENDUNG

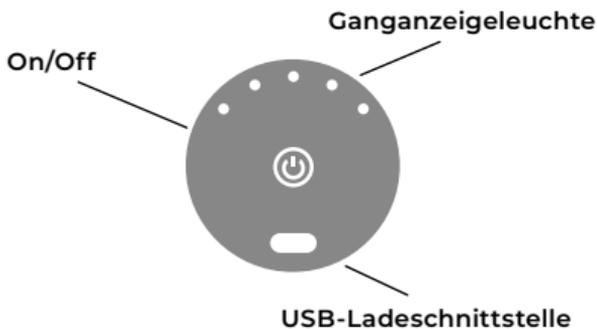

### On/Off

Halten Sie die  Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie die  Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.


Klicken Sie auf die  Schaltfläche, um die Kraft einzustellen

Der maximale Kraft beträgt fünf Gänge

Der Startgang ist der niedrigste Kraft

**Hinweis:** Um die Knochen und Muskeln zu schützen, vermeiden Sie langfristige Fixpunkt-Massage.

## VERWENDUNG DER MASSAGEKÖPFE

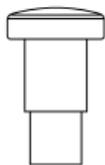


Geeignet alle  
Teile des  
Körpers



Geeignet  
für große  
Muskelgruppen



Geeignet für  
alle Gelenke des  
Körpers

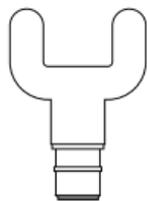


Geeignet für  
die Wirbelsäule  
Umgebung

## MASSAGEKOPF WECHSELN



## DAS LADEN

Wenn die Leistung weniger als 5 % beträgt, blinkt die Anzeige; zu diesem Zeitpunkt sollte das Gerät rechtzeitig aufgeladen werden.

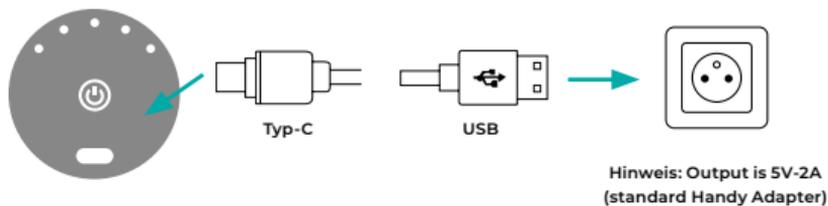

- Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf
- Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs und leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist
- Die Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden
- Verwenden Sie die Massagepistole aus Sicherheitsgründen nicht, wenn sie aufgeladen ist
- Um die Lebensdauer der Batterie zu schützen, warten Sie nicht, bis die Batterie leer ist

## ANZEIGE

- Schmerzen und Krämpfe aufgrund von Muskelkontusionen, Verstauchungen und strain
- Hilfe bei Schwellungen flow
- Lockeres und verdicktes Bindegewebe und fascia
- Reduzierung der Ansammlung von Milchsäure in muscle
- Erhöhung der Gelenke mobility
- Beseitigung von Muskelermüdung

## SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko eines elektrischen Schlages, eines Brandes oder von Verletzungen zu verringern, muss dieses Produkt in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen verwendet werden.

- Nur für Erwachsene verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer trockenen, sauberen Körperoberfläche oder über der Kleidung, indem Sie in jedem Bereich ca. 60 Sekunden lang sanft auf den Körper drücken und sich darüber bewegen.
- Verwenden Sie das Massagegerät nur auf weichem Körpergewebe nach Bedarf, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen.
- Verwenden Sie es nicht am Kopf oder an harten oder knöchernen Körperstellen.
- Verwenden Sie die Köpfe, die die beste gewünschte Wirkung auf den jeweiligen Muskelbereich erzielen.
- Unabhängig von der Reglereinstellung oder dem ausgeübten Druck können Blutergüsse auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Bereiche häufig und stoppen Sie das Gerät sofort bei den ersten Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite des Applikators fern, da es zu Quetschungen kommen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Massagegeräts.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und lassen Sie kein Wasser in die Lüftungsöffnungen des Massagegeräts eindringen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stürzen oder Missbrauch.
- Überprüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig. Nehmen Sie keine Eingriffe oder Veränderungen an den einzelnen Komponenten des Massagegerätes vor.
- Lassen Sie das Massagegerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist oder geladen wird.

## WARNUNG

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Vor Flüssigkeiten und Wärmequellen schützen.
- Schützen Sie die Lüftungsöffnungen vor Staub und kleinen Gegenständen.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Jegliche Manipulationen am Produktdesign führen zum Erlöschen der Garantie für dieses Produkt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde ununterbrochen.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen oder vor der Benutzung vom Geräteakku.
- Verletzen Sie sich nicht. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie unsicher sind, ob Sie das Gerät verwenden dürfen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung, die im Produkthandbuch enthalten ist.

## VORSICHTEN

Verwenden Sie keine Massagegeräte oder Vibrationsgeräte ohne vorherige Genehmigung von Ihrem Arzt, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft:

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Herzschwäche, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie und Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthesis oder Spondylose, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen oder Intrauterinpressare, Metallstifte oder -platten oder jegliche Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Gebrechliche Personen oder Kinder sollten bei der

Benutzung von Vibrationsgeräten von einem Erwachsenen begleitet werden. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie keine Vibrations- oder Trainingsgeräte verwenden dürfen, aber fragen Sie zuerst einen Arzt. Laufende Forschungen über die Auswirkungen von Vibrationstraining auf bestimmte medizinische Erkrankungen werden wahrscheinlich zu einer Verkürzung der Liste der oben aufgeführten Kontraindikationen führen. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationsübungen in einen Behandlungsplan in mehreren Fällen empfehlenswert ist. Die Übungen müssen auf Anraten und mit Unterstützung eines Arztes oder anderen Facharztes oder Physiotherapeuten durchgeführt werden.

## GARANTIE

Die Garantie läuft ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Wenn das Produkt aufgrund von Mängeln im Material oder Konstruktionsverfahren innerhalb von 24 Monaten ausfällt, wird das Unternehmen die defekten Teile kostenlos reparieren oder ersetzen oder neue Produkte liefern, mit Ausnahme der folgenden Fälle:

- Fehlgebrauch oder Beschädigung des Geräts durch den Transport.
- Unbefugte Demontage oder Reparatur des Geräts.
- Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung.
- Beschädigung des Produkts aufgrund ungewöhnlicher Lagerungs- oder Wartungsbedingungen des Kunden.
- Wenn der Kaufnachweis nicht erbracht wird, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Garantie abzulehnen.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wenn Sie an einer der im Abschnitt „Warnhinweise“ aufgeführten Erkrankungen leiden, konsultieren Sie bei die Anwendung von MISURA MB5 MINI immer mit Ihrem Arzt. Die MISURA Store s.r.o. ist kein lizenziertes Gesundheitsdienstleister und stellt dar, dass sie keine Fachkenntnisse in der Diagnose, Untersuchung oder Behandlung von medizinischen Zuständen jeglicher Art oder in der Bestimmung der Wirkung einer bestimmten Übung oder Therapie auf einen medizinischen Zustand hat. Bei der Teilnahme an einer Übung oder Therapie besteht die Möglichkeit einer körperlichen Verletzung. Wenn Sie an solchen Übungen oder Therapien teilnehmen, erklären Sie sich damit einverstanden, dies auf eigenes Risiko zu tun, freiwillig an diesen Aktivitäten teilzunehmen und damit das gesamte Risiko einer Verletzung auf sich zu nehmen. Indem Sie dies tun, stimmen Sie auch zu, alle bekannten oder unbekanntes Ansprüche gegen MISURA Store s.r.o. freizustellen, die aus Fahrlässigkeit oder Missbrauch des Produkts entstehen.

Sie müssen 18 Jahre alt oder älter sein. Wenn Sie starke Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort. Jedes Trainingsprogramm, auch dieses, kann zu Verletzungen führen. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie mit diesem oder einem anderen Trainings- oder Therapieprogramm beginnen. Die Hersteller, Distributoren, Lieferanten und Händler lehnen jegliche Haftung für Verluste in Verbindung mit den hierin enthaltenen Informationen, Übungsdemonstrationen oder Anweisungen ab.

Copyright® 2024. MISURA Store s.r.o., 24 Monate beschränkte Garantie. Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Wir danken Ihnen für Ihren Kauf.  
Falls erforderlich, kontaktieren Sie uns unter:

**Produzent/Importeur**

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

[www.misura.shop](http://www.misura.shop)

[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Wir haften nicht für etwaige Druckfehler.